

Kullanım Talimatı

For Hygiene & Environmental Testing




1. Adım

Pamuklu çubuğu ambalajından çıkartın.
Kuru bir yüzeyden örnek alınacaksa
kutu içinden çıkan spreyle nemlendirin.


2. Adım

Çubuğu bastırarak ve sürterek
örnek alın.

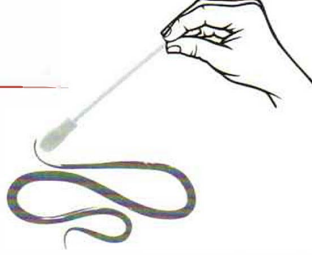

3. Adım

Kutu içerisinden çıkan test tüpünün
kapağını açın ve örnek aldığınız probu
içine yerleştirin.
Çubuğu en az 6 saniye olacak şekilde
solüsyonun içinde yukarı aşağı ve çevirerek
maruziyet oluşturun.

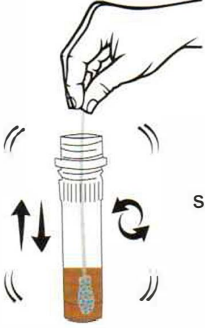

4. Adım

Çubuğu atın ve tüpün kapağını kapatın.
Oluşan renk ile tüpün üstündeki
renk dönüşüm tablosunu karşılaştırın.
Tüpün üzerindeki etiketi sökerek döküman
tebilirsiniz.



**[Sürüntü çubuğunun pamuğunda oluşan renk,
örnek aldığınız yüzey ile ilgili kesinlikle fikir vermez]**



Unexposed 1ug 5ug 10ug 40ug

