

MediLuna
Health Care

**MEDİLUNA HEALTH CARE
MEDİKAL ÜRÜNLER
TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**



Sterifirst

HAKKIMIZDA

Mediluna Health Care sterilizasyon kontrol ürünleri alanında üretim yapan ve bu pazarı geliştirmeyi hedefleyen bir firmadır. Bugüne kadar pazarda edindiği bilgi ve birikimi üretime taşıyarak müşterilerine kaliteli ve kolay ulaşılabilir ürün sunma hedefi ile kurulmuştur.

Ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarına ulaşmayı hedefi olarak belirleyen firmamız çeşitli illerdeki yaygın bayi ağı ile bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Portföyündeki ürünleri genişletme ve geliştirme çabasında olan firmamız ürünlerini dünya geneline yayma prensibi doğrultusunda hızla ilerlemektedir.

VİZYONUMUZ

Müşteri ve sektör gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak, kendimizi geliştirirken içinde bulunduğumuz pazarı da geliştirerek sağlık sektörüne katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ

Sağlık sektörünün uluslararası platformunda yer alan sağlık kurulum ve kuruluşlarına dünya standartlarına uygun olarak üretilen kaliteli, güvenilir ve süreklilik arz eden ürünlerimizi sunmak, zamanında ulaştırmak, müşteri memnuniyetimizi arttırmak ve satış sonrası destek sunarak her aşamada müşterimizle beraber olmak.



BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 6 3,5 DK



Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyon işleminin parametrelerini değerlendirmek ve anında okuma yapmak için tasarlanmıştır. Buharın ambalajlı malzemeye nüfuz etmesini ve içindeki aletlere ulaşip ulaşmadığını kontrol etmek için her sterilizasyon paketinde bir kimyasal indikatör kullanılmalıdır.

134 °C – 3,5 dakika ve 121°C – 15 dakika parametrelerinde çalışan indikatörlerdir.

Her paketin içeriği sterilizasyon işleminin birkaç kritik parametresine maruz bırakılmalıdır. Buhar için bu kritik parametreler şunlardır; doymuş buhar, zaman ve sıcaklık.

Tüm buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirler.

Belirlenen parametreler karşılandığında gösterge referans renge döner ve indikatör sonuç rengini en az 6 ay korur.

ISO 11140-1 Class / Type 6 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatör Class 6 3,5 Dk

STF0035



BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 6 7 DK



Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyon işleminin parametrelerini değerlendirmek ve anında okuma yapmak için tasarlanmıştır. Buharın ambalajlı malzemeye nüfuz etmesini ve içindeki aletlere ulaşım sağlamadığını kontrol etmek için her sterilizasyon paketinde bir kimyasal indikatör kullanılmalıdır.

134°C – 7 dakika ve 121°C – 20 dakika parametrelerinde çalışan indikatörlerdir.

Her paketin içeriği sterilizasyon işleminin birkaç kritik parametresine maruz bırakılmalıdır. Buhar için bu kritik parametreler şunlardır; doymuş buhar, zaman ve sıcaklık.

Tüm buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirler.

Belirlenen parametreler karşılandığında gösterge referans rene döner ve indikatör sonuç rengini en az 6 ay korur.

ISO 11140-1 Class / Type 6 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatör Class 6 7 Dk

STF0043



BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 4



Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyon işleminin parametrelerini değerlendirmek ve anında okuma yapmak için tasarlanmıştır. Buharın ambalajlı malzemeye nüfuz etmesini ve içindeki aletlere ulaşım ulaşmadığını kontrol etmek için her sterilizasyon paketinde bir kimyasal indikatör kullanılmalıdır.

134 °C – 3,5 dakika ve 121°C – 15 dakika parametrelerinde çalışan indikatörlerdir.

Her paketin içeriği sterilizasyon işleminin birkaç kritik parametresine maruz bırakılmalıdır. Buhar için bu kritik parametreler şunlardır; doymuş buhar, zaman ve sıcaklık.

Tüm buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirler.

Belirlenen parametreler karşılandığında gösterge referans renge döner ve indikatör sonuç rengini en az 6 ay korur.

ISO 11140-1 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Çok Parametrelili Buhar Kimyasal İndikatör Class 4 STF0065



BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 5



Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyon işleminin parametrelerini değerlendirmek ve anında okuma yapmak için tasarlanmıştır. Buharın ambalajlı malzemeye nüfuz etmesini ve içindeki aletlere ulaşım ulaşmadığını kontrol etmek için her sterilizasyon paketinde bir kimyasal indikatör kullanılmalıdır.

134 ° C – 3,5 dakika ve 121°C – 15 dakika parametrelerinde çalışan indikatörlerdir.

Her paketin içeriği sterilizasyon işleminin birkaç kritik parametresine maruz bırakılmalıdır. Buhar için bu kritik parametreler şunlardır; doymuş buhar, zaman ve sıcaklık.

Tüm buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirler.

Belirlenen parametreler karşılandığında gösterge referans renge döner ve indikatör sonuç rengini en az 6 ay korur. Geçerli durumda en az iki, optimum sonuçta ise üç kriter de siyaha dönmelidir.

ISO 11140-1 Class / Type 5 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Kimyasal İndikatör Class 5

STF0066



BUHAR ENTEGRATÖR CLASS 5

Sterifirst Buhar Entegratörler biyolojik indikatörlere en yakın sonucu verecek şekilde çalışmaktadırlar.

Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek polipropilen kaplıdır. Alt kısmı buhar geçişini önleyen alüminyum kaplıdır. Buhar sterilizasyonu işlemi esnasında biyolojik ölümün başladığı andan itibaren ilerlemeye başlayan tablet tam ölümün gerçekleştiği anda ACCEPT (kabul) kısmına geçmektedir. Buhar kimyasal entegratörü içerisinde kimyasal tablet bulunmaktadır, bu tablet sterilizasyon sürecindeki değerlere göre özel turnusol kağıt üzerinde ilerlemeye başlar ve sterilizasyonun başarısına göre ACCEPT (Kabul) veya REJECT (Red) kısmında durur. İlerlemenin uzunluğu buhara sıcaklığa ve zamana bağlıdır.

Sterilizasyon sonrası renk değişimi 6 ay süre ile sabit kalır ve kayıt amaçlı kullanılabilir.



ISO 11140-1 Class / Type 5 standardına uygun üretilmiştir.

İndikatör mürekkepleri su bazlıdır, toksik kimyasal madde veya kurşun içermez.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Entegratör Class 5

STF0071





ETİLEN OKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 5



Sterifirst Etilen Oksit Kimyasal İndikatörleri Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerinin kritik parametreleri olan zaman, sıcaklık, gaz konsantrasyonu, penetrasyon ve nemi kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu parametrelere bağlı olarak başarılı sterilizasyon sonucunda indikatör mürekkebi renk değiştirir. Sterilizasyonun başarısıyla ilgili kullanıcıya bilgi verir, kolay bir renk karşılaştırması sunar.

Etilen Oksit Kimyasal İndikatörleri sterilizasyonda paket içi indikatör olarak kullanılır. Sterilize edilecek her ambalajın içine yük ile birlikte yerleştirilmelidir.

Sterifirst Etilen Oksit Kimyasal İndikatörleri Class / Type 5 indikatörlerdir.

Yüksek teknoloji mürekkepleri toksik kimyasal medde veya kurşun içermez. Su bazlıdır.

ISO 11140-1 Class / Type 5 standardına uygun üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Etilen Oksit Kimyasal İndikatör Class 5

STF0037






HİDROJEN PEROKSİT (PLAZMA) KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 4

Sterifirst Hidrojen Peroksit (Plazma) Kimyasal İndikatörler, Hidrojen Peroksit Plazma Sistemi için özel üretilmişlerdir.

Sterilizasyon mürekkebinin rengi zamana, gaz yoğunlaşmasına ve sıcaklığa göre değişir.

Plazma veya Buharlaştırılmış Hidrojen Peroksit sterilizasyon süreçleri için uygundur. Bunlar harici bir sterilizasyon işlemine maruz bırakmayın.

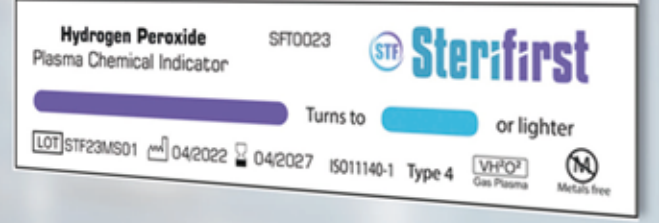

ISO 11140-1 standartlarına uygun
üretilmiştir.

Tek kullanımlıktır.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Hidrojen Peroksit (Plazma) Kimyasal İndikatör Class 4

SFT0023





BOWIE DICK TEST PAKETİ



Sterifirst Bowie-Dick Test Paketleri 134°C ile 3,5 dakika parametrelerinde çalışan ön vakum sistemli otoklav cihazlarının hava akımı sağlama performanslarını değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri sterilizasyon sorunlarının erken bir aşamadayken tespit edilmesine yardımcı olur.

Her paketin ortasında kimyasal bir indikatör bulunmaktadır. İndikatörün düzgün, tek tip renk değiştirmesi tüm havanın çıkarıldığını, buharla değiştirildiğini ve otoklavın düzgün çalıştığını gösterir.

Paket etiketi üzerindeki işlem indikatörü, paketin kullanılmış olup olmadığını açıkça gösterir.

Test kartları kayıt tutmak amacıyla saklanabilir. Kartın arka tarafı güvenli ve doğru kayıt tutmak, sağlamak için yazılabilir olarak tasarlanmıştır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri ISO 11140-1 ve 11140-4 kapsamında üretilmiştir.

Tek kullanımlıktır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri 300 ± 10 gr ağırlığındadır.

Sterifirst Bowie Dick Test Paketleri 200'lük ve 400'lük paketler şeklinde üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Bowie Dick Test Paket 400W **STF0018**
Sterifirst Bowie Dick Test Paket 200W **STF0039**





HELIX TEST İNDİKATÖRÜ VE HELIX YÜK KONTROL APARATI (PCD)



Yük kontrolü için kullanılan bu üründe indikatörler Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatının en uç kısmına yerleştirilir, hortumun en başından sadece buhar girişi olabilmektedir ve hortumun sonunda tek bir noktadan geçerek kimyasal indikatöre ulaşabilmektedir.

4 veya 6 çubuk final renge dönerse sonuç başarılı demektir fakat bir veya birden fazla çubuk son renkten farklıysa, cihaz ve sterilizasyon işlemi kontrol edilmelidir.

Sterifirst Helix Test İndikatörün renk değiştirmesi, şartların zorlaştırılmasına rağmen sağlanıyorsa, o yükteki sterilizasyon işlemi için önemli bir referans olup yükün sterilizasyon başarısı için kayıt olarak saklanmalıdır.

*Her pakette 100 adet indikatör sribi bulunmaktadır.

Sterifirst Helix PCD Test Kitleri ISO 13485:2016 ve ISO 11140-1-4 standartları kapsamında üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Helix Test İndikatörü
Sterifirst Helix Bowie Dick Test İndikatörü
Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatı (PCD) 1,5M
Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatı (PCD) 4M

STF0014
STF0057
STF0076
STF0077



PROTEİN KALINTI TESTİ

Sterifirst Protein Kalıntı Test Kiti cerrahi aletler veya temizlenmesi zor yüzeylerde kalan kalıntı proteinlerin saptanmasını ve ölçülmesini sağlayan hızlı bir testtir.

10 saniye içerisinde kesin sonuç verir.

1, 5, 20, 50 µg protein kalıntılarını tespit etmektedir.

Kullanımı basittir, inkübasyona gerek yoktur.

Sterifirst Protein Kalıntı Testi kutusunda 24 adet test tüpü, 24 adet swab çubuğu ve 1 adet nemlendirmeye yardımcı sprey bulunmaktadır.


Kan veya kan dokusu gibi az miktarlarda proteini ölçümleyebilir ve yıkama sürecinin etkinliğini doğrulayabilir.

Protein kalıntısı varsa tüpün içindeki sıvının rengi kahverengiden mor rengine dönüşür, protein kalıntısı olmadığı durumda ise sıvının rengi aynı kalır.



Her testin üzerindeki etikette; testlerin tarihinin ve bilgilerinin yazılabilmesi için boş bir alan bulunmaktadır.

Ürünün raf ömrü iki yıldır.

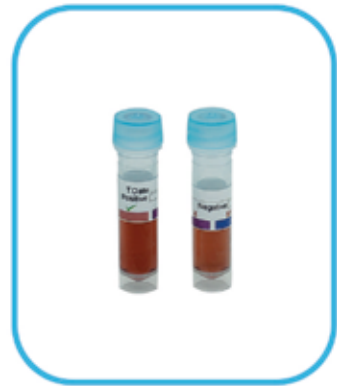


ÜRÜN KODU:

Sterifirst Protein Kalıntı Testi

STF0021



OTOKLAV BANDI

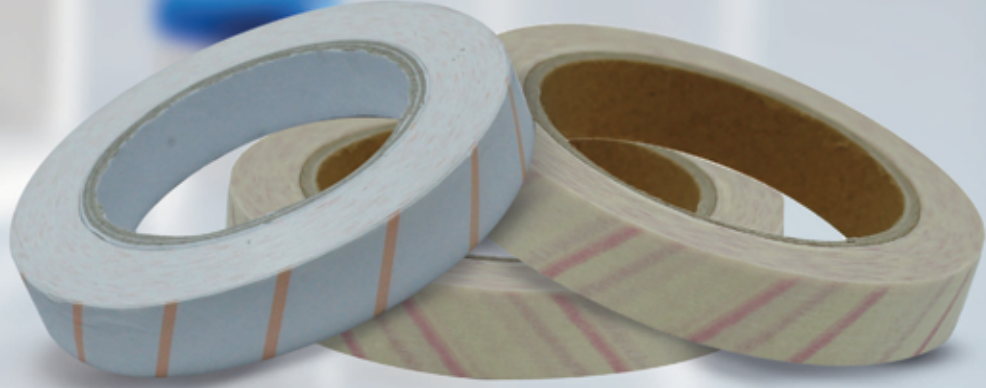


Sterifirst Maruziyet Bantları sterilizasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılan ürünlerdir. Tüm Buhar, Etilen Oksit ve Hidrojen Peroksit (Plazma) ambalaj malzemelerini kapatmak için güvenli bir çözümdür.

Sterifirst Maruziyet bantları bohçalama için kullanılan Wrap, Crepe ve SMS'lerin sarılması ve kapatılması için üretilen indikatörlü bir banttır. Bantlar üzerinde bulunan kimyasal indikatör şeritleri ayrı ayrı Buhar, Etilen Oksit ve Hidrojen Peroksit (Plazma)'e maruz kaldıktan sonra renk değiştirir. Bu sayede işlem görmüş ürünler anında tanımlanabilirler.

Farklı sterilizasyon işlemlerinde ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal aşındırmalara karşı mükemmel bir yapışkanlık gösteren, yüksek dirençli bantlardır.

Sterifirst Maruziyet Bantları Tip 1 indikatöre sahiptir.

ISO 11140-1 Sınıf 1 standartlarına uygun üretilmişlerdir.

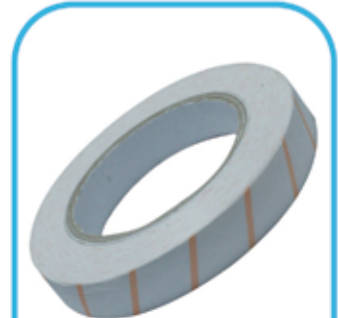

ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Maruziyet Bandı	STF0026
Sterifirst Hidrojen Peroksit Maruziyet Bandı	STF0032
Sterifirst Etilen Oksit Maruziyet Bandı	STF0082



DÖKÜMANTASYON ETİKETLERİ VE ETİKET TABANCASI



Sterifirst dökümantasyon etiketleri sterilizasyon paketlerini işaretlemek, sterilizasyon işlemlerine maruz kalmış ve kalmamış olanları ayırt etmek için tasarlanmış çift yapışkanlı kimyasal indikatörlerdir.

Class / Type 1 indikatörün renk değişimindeki hassasiyet sayesinde sonuçlar kolayca yorumlanabilir.

Çift yapışkanlı teknolojisi sterilizasyon paketlerinden kolayca çıkartılıp, arşivleme yapılıcak dosyaya veya kağıda tekrar yapıştırılabilmesini sağlar.

Etiketler üç satırlıdır. İlk satır hem harf hem rakam içerir. İkinci ve üçüncü satırlara sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılabilmektedir.

Yüksek teknoloji sterilizasyon mürekkebi ile üretilmiş tek kullanımlık kimyasal indikatörlerdir. Toksik kimyasal madde veya kurşun içermez. Su bazlıdır.

EN ISO 11140-1 Class / Type 1 standardına uygun üretilmiştir.

Sterifirst Dökümantasyon Etiketleri Buhar, Hidrojen Peroksit (Plazma) ve Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerinde kullanılabilir ve paketlerin sterilizasyon ajanlarına maruz kalıp kalmadığının kolayca anlaşılmasını sağlar.

Etiketler ISO 13485 ve ISO 9001 kalite sistemleri kapsamında üretilmektedir.

Etilen Oksit ve Buhar rulolarında 600 adet etiket, Hidrojen Peroksit (Plazma) rulusunda ise 400 adet etiket bulunmaktadır. Etiketlerin ebatları 26x28mm'dir.

Sterifirst Etiket Tabancası etiket üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, üretim ve son kullanma tarihi yazabilme özelliğine sahip kayıt amaçlı kullanılan bir üründür. İndikatör etiketleri için kolay bir kullanım ve baskı çözümü sunar.

Etiket rulosu ve kartuş kolayca yerleştirilebilir.

İlk satırda 11 adet harf, 2. Satırda 11 adet numara, 3. Satırda 11 adet numara yazılabilmektedir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Buhar Dökümantasyon Etiketleri
Sterifirst Etilen Oksit Dökümantasyon Etiketleri
Sterifirst Hidrojen Peroksit (Plazma) Dökümantasyon Etiketleri

Sterifirst Dökümantasyon Etiket Tabancası

STF0040
STF0041
STF0042

STF0081



YIKAMA İNDİKATÖRÜ PLASTİK VE İNDİKATÖR APARATI (HOLDER)



Sterifirst Yıkama İndikatörü yıkama makinesi etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır.

Kolay kayıt ve dökümantasyon sağlar.

Renk farklarını gözlemleyerek yıkayıcı etkinliğini ölçmek kolaydır. İşlem öncesi Holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.

İndikatörün yüzey formülasyonu protein, lipid ve polisakkarit içermektedir.

Yıkama indikatörü yıkama indikatör aparatına (holder) kolayca yerleştirilebilir.

Sterifirst Yıkama İndikatörü tek kullanımlıktır.

ISO 15883-1 ve 15883-5 standartları kapsamında üretilmiştir.

ISO 9001 ve ISO 13485:2016 kalite standartlarına uygun üretilmiştir.

Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı yıkama makinelerinde temizlik ve termal dezenfeksiyon işlemlerinin rutin kontrolünün yapılabilmesi için yıkama indikatörlerini tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeniden kullanılabilir Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı büyük direnç ve dayanıklılığa sahip paslanmaz çelikten üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Yıkama İndikatörü Plastik
Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı (Holder)

STF0015
STF0061



YIKAMA İNDİKATÖRÜ METAL VE ULTRASONIC İNDİKATÖR APARATI (HOLDER)

Sterifirst Metal ve Ultrasonic Yıkama İndikatörleri yıkama makinesi verimliliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır.

Kolay kayıt ve dökümantasyon sağlar.

Renk farklarını gözlemleyerek yıkayıcı etkinliğini ölçmek kolaydır. İşlem öncesi Holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.

İndikatörün yüzey formülasyonu protein, lipid ve polisakkarit içermektedir.


Yıkama indikatörü yıkama indikatör aparatına (holder) kolayca yerleştirilebilir.

Sterifirst Metal ve Ultrasonic Yıkama İndikatörleri tek kullanımlıktır.

Sterifirst Metal Yıkama İndikatörleri standart yıkayıcılarda, Sterifirst Ultrasonic Yıkama İndikatörleri ise Ultrasonic Yıkama Cihazlarında kullanılır.

ISO 15883-1 ve ISO 15883-5 standartları kapsamında üretilmiştir.

ISO 9001 ve ISO 13485:2016 kalite standartlarına uygun üretilmiştir.

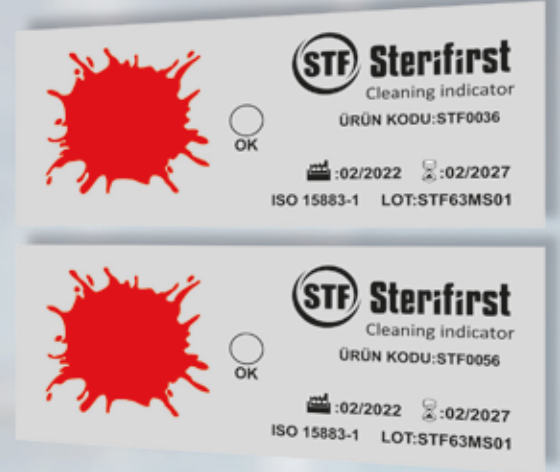

Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı yıkama makinelerinde temizlik ve termal dezenfeksiyon işlemlerinin rutin kontrolünün yapılabilmesi için yıkama indikatörlerini tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeniden kullanılabilir Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı büyük direnç ve dayanıklılığa sahip paslanmaz çelikten üretilmiştir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Yıkama İndikatörü Metal
Sterifirst Yıkama İndikatörü Ultrasonic
Sterifirst Yıkama İndikatör Aparatı (Holder)

STF0036
STF0056
STF0061



KONTEYNER FİLTRELERİ (YUVARLAK-KARE- DİKDÖRTGEN)

Sterifirst Konteyner Filtreleri, klinik ve hastanelerde sterilizasyon konteynerleriyle ve cerrahi kullanım malzemelerinin sterilizasyonunda kullanılan yumuşak ve gözenekli tek kullanımlık tıbbi kâğıt filtrelerdir. Her çeşit konteyner ve sepete uygundur.

Sterilizasyon sırasında buhar geçişini sağlamak ve sterilizasyon sonrası sterilitayı korumak için sterilizasyon konteynerinin kapağına ve gövdesine yerleştirilmektedir. Ek olarak güçlü bir bariyer görevi görür.

134° derece sıcaklığa dayanıklıdır.

Başarılı sterilizasyon sonucunda filtrenin üzerindeki Tip 1 Kimyasal İndikatör renk değişir.

Yuvarlak filtre çapı	190 mm.
Kare filtre ölçüsü	35 cm. x 35 cm.
Dikdörtgen filtre ölçüleri	14,5 cm. x 21,5 cm. 9,5 cm. x 21,5 cm.



Sterifirst Konteyner Filtreleri ISO 9001 ve ISO 13485 kalite standartlarında ISO 11140 Type 1 kapsamına uygun üretilmiştir.

*Sterifirst Konteyner Filtrelerinin talep edilen değişik ölçülerde üretimleri yapılabilir.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Yuvarlak Konteyner Filtresi
Sterifirst Kare Konteyner Filtresi
Sterifirst Dikdörtgen Konteyner Filtresi

STF0059
STF0073
STF0044-STF0045



KONTEYNER KİLİDİ

Sterifirst Konteyner Kilidi, sterilizasyonun güvenliği amacıyla üretilmiştir. Konteynerler, tek kullanımlık konteyner kilidi ile kapatılır. Konteyner kilitleri konteyner kapaklarının açılıp açılmadığını test ederler.

Plastik ve standart olan bu kilit sterilizasyon işleminden sonra kırılarak açılabilir.


Bu şekilde cihaz izinsiz açılmaya karşı korunur. Yetkisiz personel tarafından konteynerler açılmaz.

Sterilizasyon yapılacak konteynerleri, tepsileri, cihazları işaretlemek ve tanımlamak için kullanılabilecek en basit metottur.



İndikatörlü konteyner kilitleri su bazlı ve toksik olmayan kimyasal indikatörlerdir. Kilitteki indikatör ISO 11140-1 standardına göre üretilmiştir.

Sterifirst Konteyner Kilitleri ISO 9001 ve ISO 13485 kalite standartları kapsamında üretilmişlerdir.

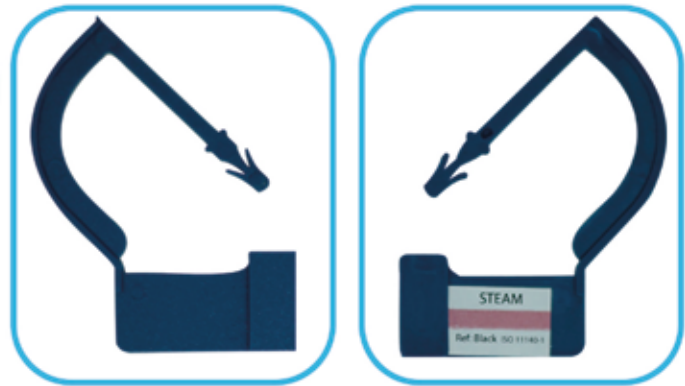


ÜRÜN KODU:

Sterifirst İndikatörlü Konteyner Kilidi
Sterifirst Konteyner Kilidi

STF0022
STF0024



KONTEYNER ETİKETİ

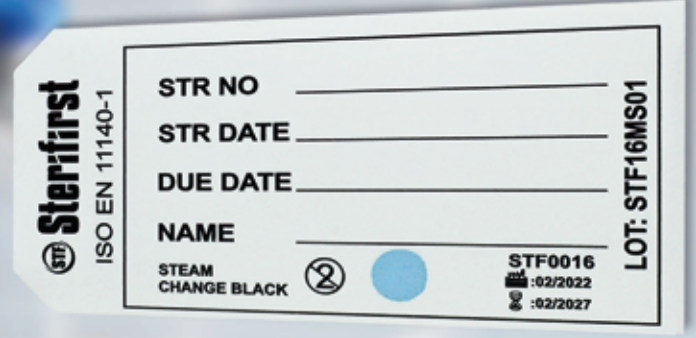

Sterifirst ISO EN 11140-1

STR NO _____

STR DATE _____

DUE DATE _____

NAME _____

STEAM CHANGE BLACK  

STF0016
:02/2022
:02/2027

LOT: STF16MS01


Sterifirst konteyner etiketi, konteyneri etiketlemek ve konteynerin buhar sterilizasyon işlemine maruz kalıp kalmadığını test etmek amacıyla üretilmiştir.

Etiketin üzerinde konteynerin sterilizasyona girip girmediğini gösteren, nokta şeklinde kimyasal indikatör bulunmaktadır.

Ürünün üzerine sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizatör numarası yazılabilmektedir.

Sterifirst Konteyner Etiketi, ISO 11140-1 standartlarına uygun üretilmiştir.

Tamamen geri dönüştürülebilirdir.

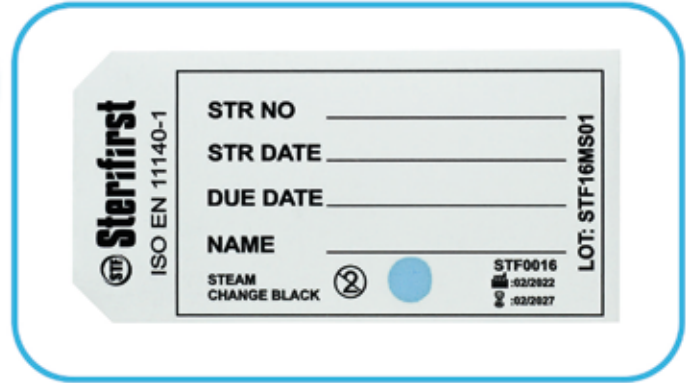

Sterifirst ISO EN 11140-1

STR NO _____

STR DATE _____

DUE DATE _____

NAME _____

STEAM CHANGE BLACK  

STF0016
:02/2022
:02/2027

LOT: STF16MS01

ÜRÜN KODU:

Sterifirst Konteyner Etiketi

STF0016



OTOKLAV CONTA BAKIM SPREYİ

Otoklav cihazı kapak contasının ve kapağının bakımları, yapışmamları, paslanmamları ve kapak ile contanın birbirlerinden rahatça ayrılması için kullanılır.

Conta üzerine sıkıldığında yüzeyde ince bir silikon tabakası oluşturarak kayganlığı arttırıp uzun vadede contanın kırılmasını ve çatlamasını engeller. Cihazı ve kapağını neme karşı korur.

Sıkılan yüzey üzerinde antistatik kayganlaştırıcı özelliği uzun süre kalıcıdır.

Suya karşı yüksek direnç gösterir.

Her marka otoklav cihazlarına uygundur.



Renksiz ve şeffaftır.

Ürünün raf ömrü üç yıldır.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Otoklav Conta Bakım Spreyi

STF0033



ULTRASONİK YIKAMA MAKİNESİ KAVİTASYON TESTİ



Sterifirst Ultrasonik Yıkama Makinesi Kaviteasyon Testi Ultrasonik yıkama makinalarının temizleme işlemlerini rutin olarak kontrol etmek ve izlemek için tasarlanmıştır.

18°C ile 70°C arasındaki sıcaklıklarda ve 35 kHz eşit veya daha yüksek frekanslarda çalışır. Kaviteasyon enerjisi yeterli olduğunda, cam içindeki taneciklerin titreşimleri solüsyonda renk değişimi meydana getirir.

Renk değişimi cihazın düzgün çalıştığını gösterir.

Renk değişimi sayesinde anında sonuç alınır.

Sterifirst Ultrasonik Yıkama Makinesi Kaviteasyon Testi ISO 15583-1 ve ISO 15583-5 standartları kapsamında üretilmiştir.

Sterifirst Ultrasonik Yıkama Makinesi Kaviteasyon Testinin bir kutusunda 24 adet test bulunmaktadır.

Raf ömrü 24 aydır.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Ultrasonik Yıkama Makinesi Kaviteasyon Testi **STF0069**





STERİLİZASYON RULOLARI



Sterifirst Sterilizasyon Ruloları tıbbi malzemeler ve diğer sağlık ekipmanları için güçlü ve güvenli steril bariyer sistemleri sağlar.


Yırtılmayı önlemek için ekstra güçlendirilmiş katmanlı filminden üretilmiştir. Şeffaf, çok katmanlı medikal kopolimer film sayesinde paket içindeki ürün rahatlıkla görülebilir. Açma yönü gösterilmektedir.

60 gsm veya 70 gsm tıbbi kraft kağıtlı üstün bariyer yapısı tüm kapatma makinaları ile uyumludur ve kolayca kapatılabilir.

Sterifirst Sterilizasyon Ruloları indikatörleri ISO 11140 kapsamında üretilmiştir. EN-868-5 kalite standartlarına uygundur.

Tüm Sterifirst Sterilizasyon Rulolarında buhar ve etilen oksit indikatörleri mevcuttur.

İndikatörler su bazlıdır, Toksik madde içermez.

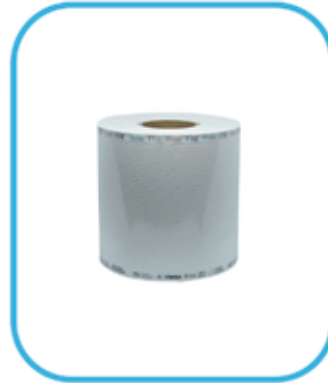

ÜRÜN KODU:

Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 5 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 7.5 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 10 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 15 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 20 cm. X 200 m.

STF0005
STF0006
STF0007
STF0008
STF0009

Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 25 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 30 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 35 cm. X 200 m.
Sterifirst Sterilizasyon Rulosu 40 cm. X 200 m.

STF0010
STF0011
STF0012
STF0013



SEAL CHECK BUHAR VE HİDROJEN PEROKSİT



Sterifirst Seal Check kapatma makinelerinin sızdırmazlık standartlarına uyup uymadığını kontrol etmek için kullanılır. Kapatma makinesinin sonuçlarını ve kalitesini gözle görülür şekilde gösterir, böylece sızdırmazlık sorunları hızlı bir şekilde bulunabilir. Sızdırmazlık parametreleri, gereksinimleri ve kalitesi doğru şekilde sağlanabilir.

Sterifirst Seal Check'ler kapatma cihazlarının rutin olarak gözlenmesini sağlar. Hızlı okuma sağlar ve kolayca yorumlanabilir. Kayıtlar saklanabilmektedir.

Sterifirst Seal Check Buhar yüksek sıcaklıkta kağıt ve plastik,

Sterifirst TYVEK Seal Check düşük sıcaklıkta kağıt ve plastik.



ÜRÜN KODU:

Sterifirst Seal Check Buhar
Sterifirst Seal Check Hidrojen

STF0025
STF0058



Merkez Ofis
İmbatlı Mahallesi 1595 Sk. Ümsan Vera Blok
No:137/E Karşıyaka/İzmir

Üretim ve Depo
Meriç Mahallesi 5746/13 Sk. No:15 Bornova/İzmir

+90 (232) 330 27 27

+90 (232) 330 47 47

+90 (533) 597 58 62

info@mediluna.com.tr

muhasabe@mediluna.com.tr

