



HELIX TEST İNDİKATÖRÜ VE HELIX YÜK KONTROL APARATI (PCD)




Yük kontrolü için kullanılan bu üründe indikatörler Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatının en uç kısmına yerleştirilir, hortumun en başından sadece buhar girişi olabilmektedir ve hortumun sonunda tek bir noktadan geçerek kimyasal indikatöre ulaşabilmektedir.

4 veya 6 çubuk final renge dönerse sonuç başarılı demektir fakat bir veya birden fazla çubuk son renkten farklıysa, cihaz ve sterilizasyon işlemi kontrol edilmelidir.

Sterifirst Helix Test İndikatörün renk değiştirmesi, şartların zorlaştırılmasına rağmen sağlanıyorsa, o yükteki sterilizasyon işlemi için önemli bir referans olup yükün sterilizasyon başarısı için kayıt olarak saklanmalıdır.

*Her pakette 100 adet indikatör stribi bulunmaktadır.

Sterifirst Helix PCD Test Kitleri ISO 13485:2016 ve ISO 11140-1-4 standartları kapsamında üretilmiştir.

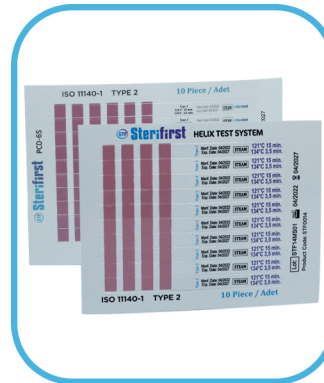

ÜRÜN KODU:

Sterifirst Helix Test İndikatörü
Sterifirst Helix Bowie Dick Test İndikatörü
Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatı (PCD) 1,5M
Sterifirst Helix Yük Kontrol Aparatı (PCD) 4M

STF0014
STF0057
STF0076
STF0077



Merkez Ofis
İmbatlı Mahallesi 1595 Sk. Ümsan Vera Blok No:137/E Karşıyaka/İzmir
Üretim ve Depo
Meriç Mahallesi 5746/13 Sk. No:15 Bornova/İzmir

+90 (232) 330 27 27
+90 (232) 330 47 47
+90 (533) 597 58 62
info@mediluna.com.tr
muhasabe@mediluna.com.tr

